



GOOD
DESIGN

携帯型マルチヘルスマニタ

Checkme Pro X

背面電極付きモデル

チェックミープロ X



すべてがこの
コンパクトサイズに。

心電計 | パルスオキシメータ | デイリーチェック
体温計 | SpO2トレンド | 歩数計 | アラーム時計

Features exclusive to Pro X.

聴診器感覚で、
心電図をすばやく確認

チェックミープロ X は、
背面電極を胸に当てるだけで、
素早く心電波形が確認・記録できます。



診療報酬点数

携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点
経皮的動脈血酸素飽和度測定 35点
終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点

チェックミープロ X オープン価格

販売名: ヘルスマニター Checkme Pro
認証番号: 227AABZX00038000
一般的名称: 発作時心臓活動記録装置, パルスオキシメータ, 皮膚赤外線体温計
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者: 三栄メディシス株式会社

保証期間

ご購入より1年

Checkme Pro X の
詳しい情報はこちらの
二次元コードからアク
セスしてください



<https://www.checkme.jp/checkme-prox/>

心電計



自覚症状が出たらすぐに測定

I・II誘導測定が可能です。



別売りの誘導コードを使った測定も可能です。

誘導コードを使用した測定方法ではST測定値の結果も表示します。

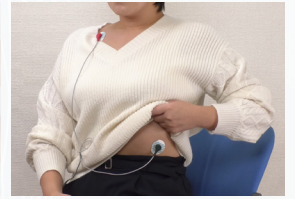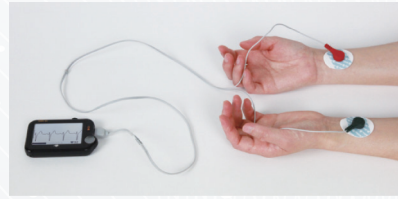

パルスオキシメータ ストレスフリーの測定方法

指をそっと添えるだけ。

クリップで「ギュッ」と挟むタイプではなく、圧迫を感じない測定機器なのでいつでも気軽に測定できます。指が細い女性やお子様にも対応しています。



別売りのパルスオキシメータプローブを使った測定も可能です。



デイリーチェック

毎日の健康チェックに

心電図とSpO2を同時に測定。

手のひらの中で30秒簡単チェック。



心拍数、SpO2の日々の変化をグラフで表示。

体温計

体温測定をもっと気軽に

たった2秒、こめかみで体温測定。



こめかみにセンサーをあてて2秒で体温を測ります。こめかみ辺りをスキャンするようにセンサーを移動させることで一番高い温度を表示します。触れなくても2cm以内なら測定できます。

SpO2トレンド

睡眠状態をチェック

睡眠中の血中酸素濃度をチェック。

別売りのシリコンケースとストラップバンドで腕に固定し、パルスオキシメータプローブを指に装着し、測定開始ボタンを押して、眠るだけです。



SpO2が90%以下に低下した回数・時間を結果画面で表示します。通常、睡眠時は95%ほどですが、無呼吸状態になると90%以下になります。



睡眠中のSpO2、脈拍の変化をグラフで表示。

【付属品】充電用USBケーブル / 充電アダプタ / ネックストラップ 【オプション品】誘導コード 6,600円(税込) / 心電図用電極50個入り 3,080円(税込) / パルスオキシメータプローブ 16,500円(税込) / シリコンケース 1,100円(税込) / ストラップバンド 1,100円(税込) / 心電オキシアダプタ 27,500円(税込)




ProB ADV、ProX用アプリ

チェックモニタ

Check Monitor

無料でダウンロードしていただけます！

大きな画面で見やすい！

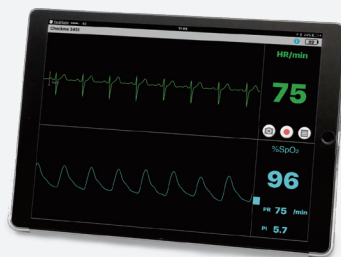

Bluetooth通信でタブレットやスマートフォンに、測定中のバイタル情報をリアルタイムに表示！

チェックミー本体に誘導コードとパルスオキシメータプローブを使用し、お持ちのタブレットやスマートフォンにBluetooth通信でつなぐことで、常に心電図と動脈血酸素飽和度を測定します。大きな画面で測定値が見やすく状態の変化に気づきやすいです。

※チェックミー本体が満充電時で連続最大10時間ほど
※状態変化をお知らせするアラームなどの機能はありません。
※チェックモニタには、別売の「心電オキシアダプタ」、「誘導コード」、「心電図用電極」、「パルスオキシメータプローブ」、「シリコンケース」及び「ストラップバンド」が必要です。

対応OS: iPadOS/iOS15.0以上 | Android11.0以上
※アンドロイドの機種によってはご使用いただけない場合があります。

Me SAN-EI 三栄Xデバイス株式会社

〒607-8116 京都市山科区小山鎮守町14-1
TEL:075-502-0066 FAX:075-502-0068